

REF : M-ZOLABROWN

ZOLA BROWN



Contact

+33 (0)5 32 62 96 60
contact@malys-equipements.com

*M*ALYS ÉQUIPEMENTS
Beauté, Santé, Bien-être 



Caractéristiques	Dimensions
Couleur de la structure : Bois naturel	Longueur : 190 cm
Équipée d'un plateau de rangement	Largeur : 80 cm
Hauteur réglable	Hauteur réglable : 64 cm à 95 cm
Réglage manuel du dossier	Packaging : 194x84x19cm
Coussin repose-tête	
Matelas confortable	
Garantie 1 an	

Description

La table de massage ZOLA BROWN est une table professionnelle au design naturel et élégant, conçue pour offrir confort et stabilité lors des soins de massage, de bien-être et d'esthétique.

Sa structure en bois massif naturel lui apporte une excellente robustesse ainsi qu'une finition chaleureuse qui s'intègre parfaitement dans les espaces de spa, instituts de beauté ou cabinets de soins. Son revêtement en simili cuir offre une surface confortable et facile à entretenir.

Elle est équipée d'un coussin permettant un meilleur confort du client pendant les soins en position allongée. La table dispose également d'un porte-drap intégré pratique pour ranger le linge et les accessoires nécessaires aux prestations.



Features	Dimensions
Frame color: Natural wood	Length: 190 cm
Equipped with a storage shelf	Width: 80 cm
Adjustable height	Adjustable height: 64 cm to 95 cm
Manual backrest adjustment	Packaging: 194x84x19 cm
Headrest cushion	
Comfortable mattress	
1-year warranty	

Description

The ZOLA BROWN massage table is a professional table with a natural and elegant design, engineered to provide comfort and stability during massage, wellness, and aesthetic treatments.


Its solid natural wood frame ensures excellent robustness and a warm finish that blends seamlessly into spas, beauty salons, or treatment clinics. The faux leather upholstery provides a comfortable surface that is easy to clean and maintain.

It comes equipped with a cushion to ensure optimal client comfort while lying down during treatments. The table also features an integrated roll holder, making it convenient to store the linens and accessories needed for your services.





Parts list

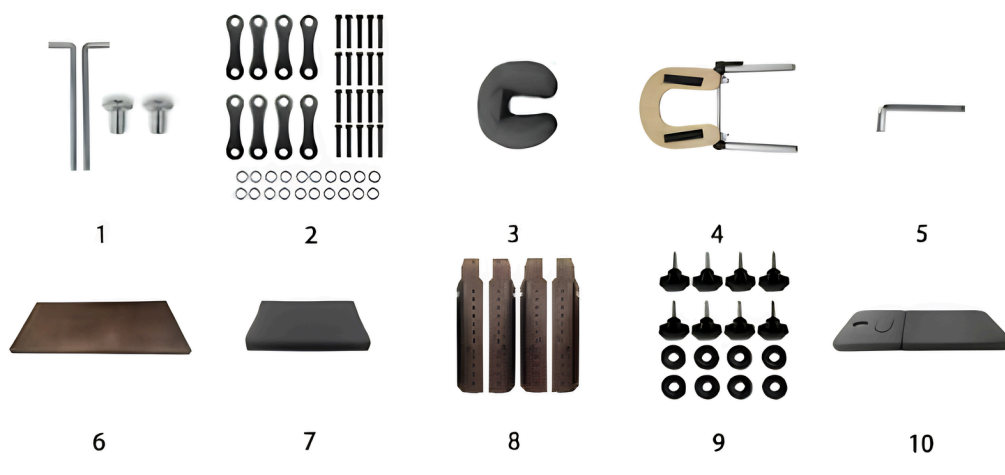

Step 1

Place plastic pad (9) onto the five - star handle, and screw it onto bed leg (8) (note : the adjustable part of the bed leg should be level with the bed leg before screwing the handle) and then install the bed leg onto figure 10 bed frame (note : all the nuts on the four bed legs should face inward), and the screws should not be tightened yet.)



Step 2

Install tray (6) using screws (2), fixate shelf screws completely using lever (5).



Step 3

Set the bed in its uprightr position, insert the short side of the backrest rod (1) into the plastic piece on the bed, and insert the long side into the hole of the iron piece on the wooden frame.






Step 4

Fixate all screws on bed legs completely using wrench (5), fixate face support (3) into its holder (4) and install into bed socket and place head pillow (7) onto the bedsurface.



Liste des pièces

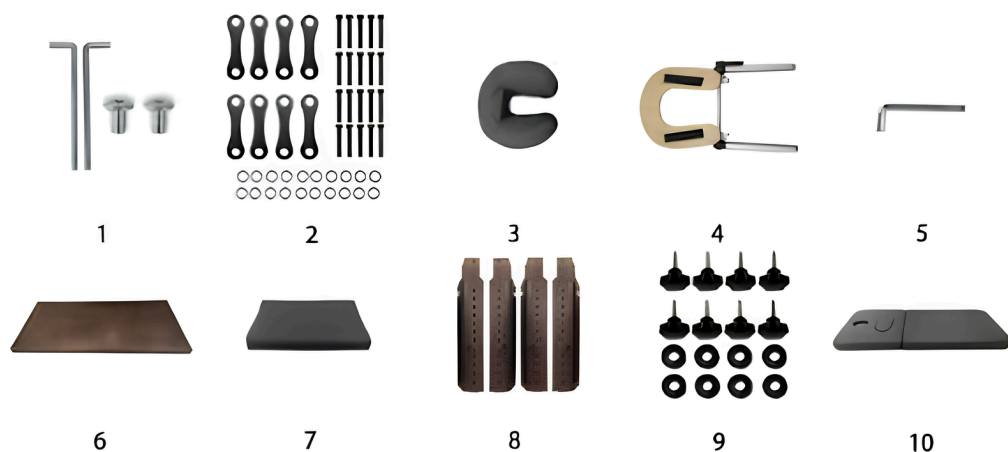

Étape 1

Placez le patin en plastique (9) sur la poignée en étoile, puis vissez-la sur le pied de lit (8) (note : la partie réglable du pied de lit doit être mise à niveau avec le pied avant de visser la poignée). Installez ensuite le pied de lit sur le cadre de lit (figure 10) (note : tous les écrous des quatre pieds de lit doivent être orientés vers l'intérieur), et les vis ne doivent pas encore être serrées.




ZOLA BROWN



ZOLA BROWN

Étape 2

Installez le plateau (6) à l'aide des vis (2), puis fixez complètement les vis de l'étagère à l'aide du levier (5).

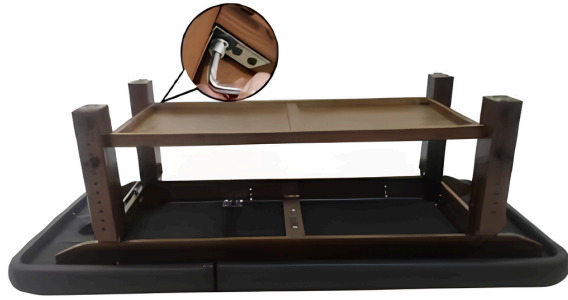

Étape 3

Mettez le lit en position verticale, insérez le côté court de la tige du dossier (1) dans la pièce en plastique du lit, puis insérez le côté long dans le trou de la pièce en fer sur le cadre en bois.



Étape 4

Fixez complètement toutes les vis des pieds de lit à l'aide de la clé (5), enclenchez le support de tête (3) dans son support (4) et installez l'ensemble dans la douille du lit, puis placez le coussin repose-tête (7) sur la surface du lit.

